

Еднокомпонентна система S1



Еднокомпонентна система илеостомни (отворени) торбички

Stomadress Plus Drainable
до 64 mm



Еднокомпонентна система колостомни (затворени) торбички

Stomadress Plus Closed
до 64 mm



Еднокомпонентна система уростомни торбички

Stomadress Plus Urostomy
до 64 mm – 600 ml



Еднокомпонентна система илеостомни (отворени) торбички

Stomadress Large
до 100 mm



Еднокомпонентна система капачета

Stomadress Plus Stomacap

Еднокомпонентна система – детски торбички



Еднокомпонентна система илеостомни детски торбички

Stomadress Little Ones Drainable



Еднокомпонентна система колостомни детски торбички

Stomadress Little Ones Closed
Mini Pouch



Еднокомпонентна система уростомни детски торбички

Stomadress Little Ones Urostomy

Козметика за обслужване на стомата и аксесоари



Лечебна паста
Orabase Pasta 30 g



Адхезивна паста, запълваща неравностите по кожата около стомата
Stomahesive Pasta 60 g



Кърпички, създаващи защитен слой
PBW

Кърпички за почистване на адхезивни остатъци
ARW



Гелобразувател
Ilesorb



Защитна пудра
Orahesive Powder 25 g



Коланче за 2S
ConvaTec Belt



Convatec

A Bristol-Myers Squibb Company

Сигурност,
която
чувате!

Двукомпонентна система – плочки Combihesive 2S



Двукомпонентна система плочка
Stomahesive Wafer
32, 38, 45, 57 mm
70 mm, 100 mm



Двукомпонентна система дуофлекс плочка
Duoflex Wafer
32, 38, 45, 57 mm
70 mm




Двукомпонентна система флексибъл плочка
Flexible Wafer
32, 38, 45, 57 mm
70 mm



Двукомпонентна система конвекс плочка
Convex
13/45 - 50/57 mm



Двукомпонентна система детска плочка
Little Ones Wafer
32, 45 mm

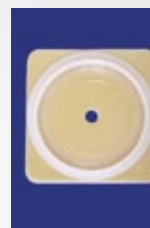

Двукомпонентна система акордеон плочка
Accordion Wafer
70 mm
100 mm

Двукомпонентна система – торбички Combihesive 2S



Двукомпонентна система илеостомни (отворени) торбички
Drainable Pouch (Clear)
до 100 mm



Двукомпонентна система колостомни (затворени) торбички
Closed Pouch (Beige)
до 70 mm



Двукомпонентна система уростомни торбички
Urostomy Pouch
до 70 mm - 600 ml



Двукомпонентна система илеостомни детски торбички
Little Ones Drainable Pouch



Двукомпонентна система колостомни детски торбички
Little Ones Closed Pouch



Двукомпонентна система уростомни детски торбички
Little Ones Urostomy Pouch

Начин на употреба



1



2



3



4



5



6



7

Преди всяко поставяне на двукомпонентната система, плочка и торбичка, почистете стомата и околната кожа с топла вода и сапун и подсушете добре.

1. Определете размера и формата на стомата с помощта на хартиен шаблон, очертайте върху предпазната хартия на плочката.
2. С ножичка уголемете отвора на плочката до вече очертания размер и форма, така че да покрива кожата около стомата без да притиска червото.
3. Отстранете защитната хартия. Не пипайте залепващата повърхност.

4. Използвайте адхезивна паста - Stomahesive за запълване на неравностите и по-добро залепване на плочката.
5. Поставете плочката внимателно около стомата, като притискате леко с ръка.
- 6.7. Прикрепете торбичката към плочката с лек натиск, така че пръстените им да се съединят напълно. Предварително се уверете, че в торбичката има въздух.

За да смените торбичката хванете „ушенцето“ ѝ и внимателно я издърпайте настрана.